

MÁSCARA LARÍNGEA c/ ACESSO GÁSTRICO NovaMASC-Duo *DESCARTÁVEL em PVC*

Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO Tamanhos: nº 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0
com DUPLO-LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO

Esterilizada em embalagens individuais

Prontas para uso imediato

Conduto com amplo diâmetro

Abas (aletas) proximais que facilitam a fixação
e o correto posicionamento da **NovaMASC-DUO**

Protetor ANTI-MORDEDURA integrado

Conector padrão 15mm ISO


Inteiramente feita em PVC de alta qualidade

macio, conformável e de grau médico

Formato anatômico em “L” curvo a 135°:

adequado à rápida inserção

Exclusivo “Berço Protetor” para o manguito

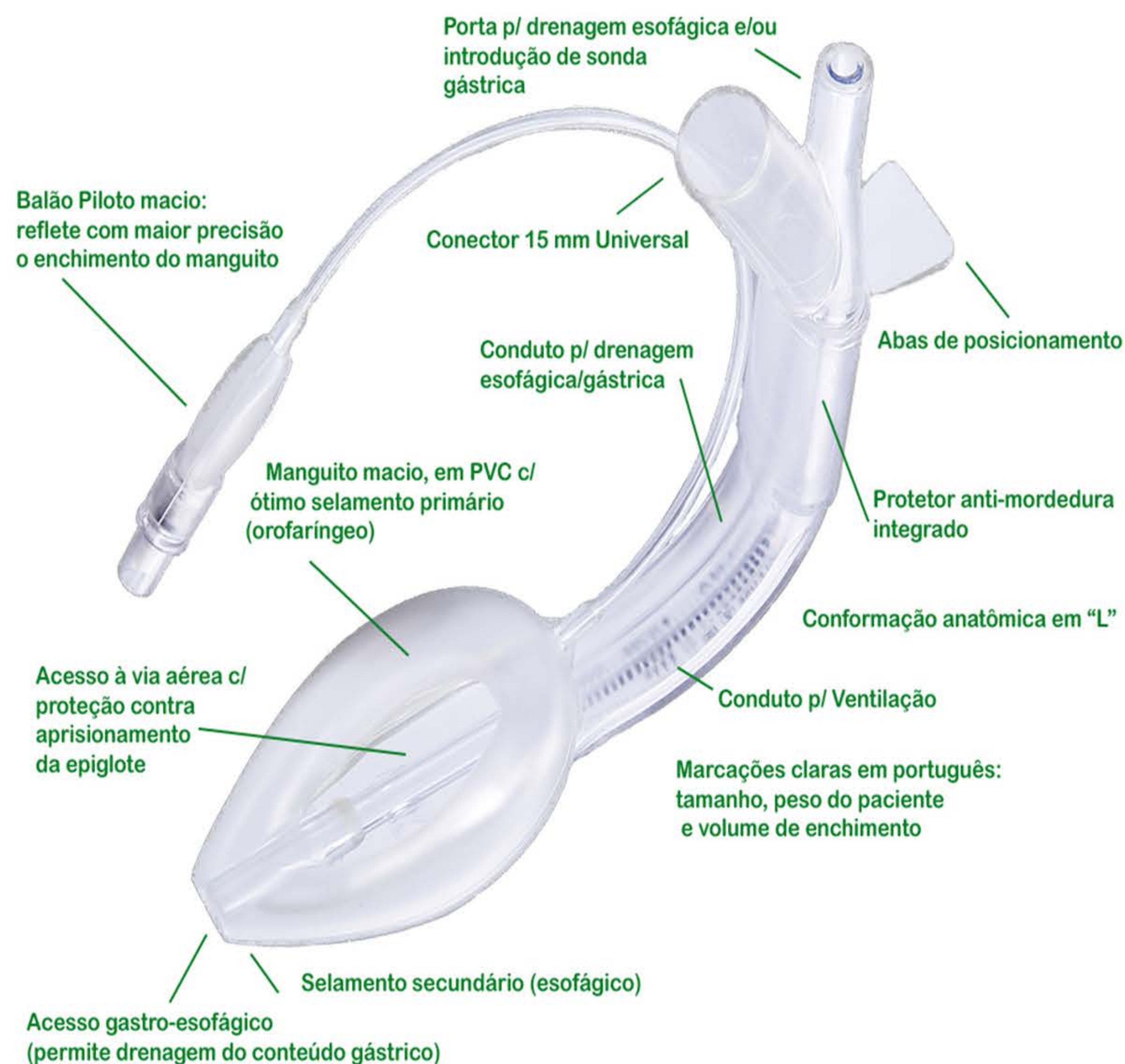

DUPLA VIA com lúmen exclusivo para acesso e **drenagem gástrica** e outro somente para ventilação;
Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico;
Manguito (cuff) macio e conformável:

possibilita selamento proximal primário das vias aéreas

e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;

Conformação anatômica interna do coxim, que previne obstrução acidental do conduto ventilatório

Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Código de barras padronizado (EAN);

Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente;

Balão piloto de paredes finas: maior sensibilidade e precisão quanto à pressão de enchimento do *cuff*

Isenta de látex;